

数智医疗影像平台

快速入门



腾讯云

【版权声明】

©2013–2026 腾讯云版权所有

本文档（含所有文字、数据、图片等内容）完整的著作权归腾讯云计算（北京）有限责任公司单独所有，未经腾讯云事先明确书面许可，任何主体不得以任何形式复制、修改、使用、抄袭、传播本文档全部或部分内容。前述行为构成对腾讯云著作权的侵犯，腾讯云将依法采取措施追究法律责任。

【商标声明】



及其它腾讯云服务相关的商标均为腾讯云计算（北京）有限责任公司及其关联公司所有。本文档涉及的第三方主体的商标，依法由权利人所有。未经腾讯云及有关权利人书面许可，任何主体不得以任何方式对前述商标进行使用、复制、修改、传播、抄录等行为，否则将构成对腾讯云及有关权利人商标权的侵犯，腾讯云将依法采取措施追究法律责任。

【服务声明】

本文档意在向您介绍腾讯云全部或部分产品、服务的当时的相关概况，部分产品、服务的内容可能不时有所调整。您所购买的腾讯云产品、服务的种类、服务标准等应由您与腾讯云之间的商业合同约定，除非双方另有约定，否则，腾讯云对本文档内容不做任何明示或默示的承诺或保证。

【联系我们】

我们致力于为您提供个性化的售前购买咨询服务，及相应的技术售后服务，任何问题请联系 4009100100 或 95716。

文档目录

快速入门

PC 端

移动端

快速入门

PC 端

最近更新时间：2026-01-12 10:51:02

简介

数智医疗影像平台拥有丰富的医学影像应用功能、人工智能辅助诊断、强大的影像浏览工具，满足医疗行业院内、院间互联互通、降本增效的全场景需求。本文带您快速了解数智医疗影像平台在 PC 端的操作与使用。

前提条件

- 推荐安装 Google Chrome 浏览器
- 登录 [数智医疗影像平台 PC 端](#)

注册和登录

注册

医联体管理员账号请联系腾讯觅影工作人员后台为您开通。普通用户账号请联系您所属机构的管理员为您添加开通。

登录

数智医疗影像平台提供多种登录方式供您选择，您可以选择**账号密码登录**、**扫码登录**。当您第一次登录时，需要扫码关注腾讯觅影公众号完成手机号验证绑定，并设置初始登录密码才可以登录成功。若您是机构管理员，请在登录页单击**管理员登录**可切换至管理平台登录。



远程诊断

登录成功后，您即进入数智医疗影像云平台主界面，在该页面您可以进行远程诊断，同时显示您所属医疗机构上传至云端的患者信息和检查列表。

The screenshot shows the main interface of the intelligent medical imaging cloud platform. On the left, there is a sidebar with icons for various services: 放射云 (Radiology Cloud), 本院检查 (In-hospital Exams), 远程诊断 (Remote Diagnosis), 超声云 (Ultrasound Cloud), 病理云 (Pathology Cloud), 内镜云 (Endoscopy Cloud), 心电云 (ECG Cloud), 眼科云 (Ophthalmology Cloud), 远程会诊 (Teleconsultation), 远程宣房 (Remote宣房), 远程示教 (Remote Teaching), 数据统计 (Data Statistics), and 质控管理 (Quality Control Management). The current page is '远程诊断'.

The main content area is titled '本院检查' (In-hospital Exams) and shows a table of examination results. The table has columns: 全部检查 (All Exams), 待检查 (Pending), 待诊断 (Pending Diagnosis), 诊断中 (In Progress), 已诊断 (Diagnosed), 患者ID (Patient ID), 姓名 (Name), 性别 (Gender), 年龄 (Age), 检查ID (Check ID), 检查状态 (Check Status), 设备类型 (Device Type), 检查项目 (Check Item), 检查类别 (Check Category), 检查时间 (Check Time), 打印时间 (Print Time), 登记日期 (Registration Date), 归档状态 (Archiving Status), and 操作 (Operations). There are 792 records in total, with page navigation buttons at the bottom.

影像浏览

在检查列表双击任意检查，即可进入该检查的影像浏览页面浏览患者影像。

报告编辑

在检查列表操作栏单击任意检查的报告，即可进入该检查的报告编辑页面。

- 报告编辑：**用户可进行报告编辑、保存。
- 报告审核：**有权限的用户可进行报告初诊、审核、打印。
- 对比影像：**用户可选择多个检查进行对比影像。
- 插入知识库词条：**用户可将报告知识库的词条插入至报告正文。

说明：

一个检查报告同时仅允许一个用户编辑，当您正在编辑时将锁定该报告的编辑状态至您名下。保存或审核后将释放编辑状态，或连续30min无操作时系统将自动释放编辑状态。

检查管理

用户在检查列表可进行检查管理：

- 检查筛选：**用户可快捷筛选检查日期。
- 检查排序：**检查列表支持按检查时间、打印时间进行倒序、正序排序。

远程会诊

用户在数智医疗影像云平台导航栏单击远程会诊可进入远程会诊列表，在该页面您可以进行院内或跨院间的多学科会诊。

创建会诊

用户在会诊列表单击创建会诊即可进入创建会诊的页面：

- 邀请对象：** 用户可从通讯录选择会诊科室或会诊对象，并可选择必须参加的对象。所有必须参加的科室必须审核同意后，会诊才会拉取成功。
- 会诊资料：** 用户可通过患者证件号、HIS 号关联云端的患者信息、检查信息至当前会诊。也支持从本地上传文件。

The screenshot shows the 'Create Consultation' interface. At the top, there's a header with icons for back, forward, and search. Below it is a section titled '填写会议详情' (Fill in meeting details). This section contains fields for '会议号' (Meeting ID), '会议链接' (Meeting link), '会诊主题' (Consultation topic), and '会诊时间' (Consultation time) with a date range from July 3, 2023, to July 3, 2023, and times from 16:30 to 17:30. There's also a '自动识别' (Automatic recognition) button with a placeholder '请在此粘贴腾讯会议分享信息，点击识别后自动填充左侧相关信息'. A '提交申请' (Submit application) button is at the top right. Below this, there's a '邀请对象' (Invited objects) field with a '仅选择科室' (Only choose department) checkbox. Under '会诊类型' (Consultation type), '单学科会诊' (Single specialty consultation) is selected. A '理由/要求' (Reason/Requirement) text area has a character limit of 1000. The bottom section is for '患者信息' (Patient information) with fields for '关联患者' (Associated patient) via HIS号 (HIS number), '患者姓名' (Patient name), '患者ID' (Patient ID), 'HIS号' (HIS number), '患者性别' (Patient gender) with options '未知' (Unknown), '男' (Male), and '女' (Female), '证件号' (Document number) for ID card, '出生日期' (Date of birth), and '手机号' (Mobile phone number).

会诊审核

用户在会诊审核列表可进行会诊审核，前提是用户具备审核权限：

- 调剂专家：** 审核用户在会诊审核页面单击调剂专家，可修改调剂科室的参会专家。
- 审核会诊：** 审核用户可单击同意并参会、同意、拒绝进行会诊审核。

加入会诊

会诊审核完成后，所有被邀请的参会人员在会诊列表可加入会诊：

- 会诊室：** 所有参会人员单击查看会诊可进入会诊室，查看会诊信息、患者信息、云端资料、上传资料、会诊流程等信息。用户单击查看影像可浏览 DICOM 影像，单击影像报告可查看当前云端影像对应的报告内容。
- 音视频会诊：** 所有参会人可单击开启音视频会诊进入腾讯会议开始会诊，系统将自动引导跳转至腾讯会议。

- **会诊报告：**所有参会人均可在会诊室内编辑会诊报告。单击编辑后激活报告编辑进行内容撰写，完成后可进行保存、提交、打印。

AI 辅助诊断

数智医疗影像平台拥有强大的医学影像人工智能辅助诊断工具，帮助医生提高诊断效率、降低漏诊率。当用户开通人工智能辅助诊断后，可调阅人工智能引擎进行辅助诊断，并返回判别结果。

青光眼 AI 辅助诊断


用户在数智医疗影像云平台眼科云检查列表双击任意检查，进入检查报告页面。当开启青光眼 AI 辅助诊断后，用户在 AI 判别区可查看当前检查眼底影像 AI 判别的结果：

- **青光眼评估结果：**AI 可根据当前影像分别给出左眼（OS）、右眼（OD）的判别结果，包括：疑似青光眼样眼底表现、未见明显异常。
- **眼底多病种评估结果：**AI 可根据当前影像给出7大常见眼底疾病，以及11种眼底病灶特征描述，并支持用户手动修改结果。
- **API 接口调用：**青光眼 AI 除了提供平台调阅外，用户也可通过 API 接口调用返回结果，或返回 PDF 报告。

肺炎 AI 辅助诊断

用户在数智医疗影像云平台放射云检查列表双击任意检查，进入影像页可查看肺炎 AI 辅助诊断：

- **分诊建议：**包括了 AI 病灶识别、AI 病灶标注、AI 病灶分割；
- **量化评估：**包括肺炎列表、肺炎占全肺/左肺/右肺的大小、肺炎体积、均值、最大 /最小 CT 值及标准差，以及支持显示或不显示肺炎标注；
- **直方图分析-肺炎：**显示患者影像的左/右直方图与正常患者的左/右直方图进行对比，并显示左/右肺在不同 CT 区间的占比，显示患者影像全肺肺炎的直方图与正常患者全肺的直方图进行对比，并显示左/右肺在不同 CT 区间的占比；
- **病灶所在肺叶显示：**点击病灶列表中的某一条病灶，可以在左侧肺部示意图中高亮提示出该病灶所在的肺叶。

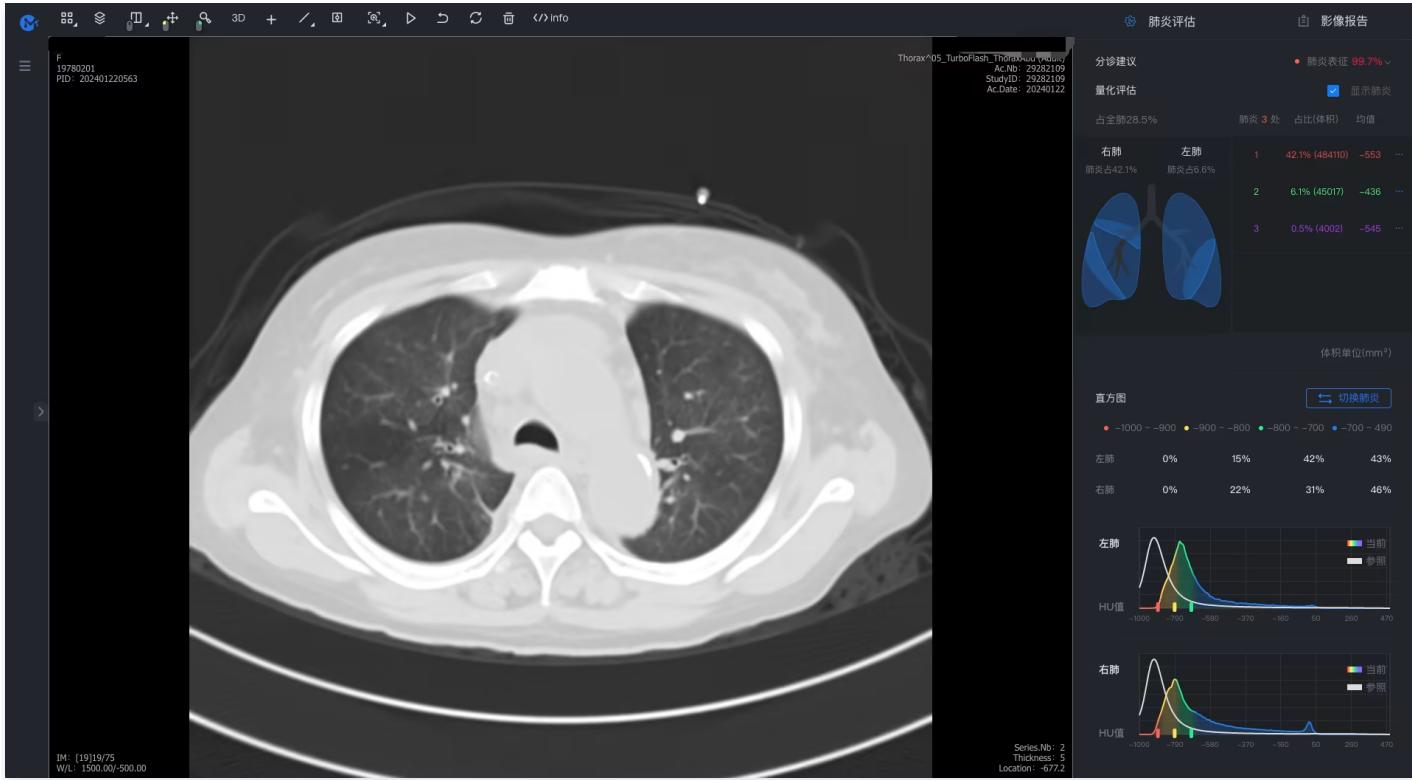

结直肠 AI 辅助诊断

结直肠 AI 辅助诊断为本地部署产品且在医疗机构使用，供执业内窥镜医师用于成人结肠内窥镜检查。在内窥镜图像处理器输出的独立视频图像中实时显示疑似息肉的区域，有疑似息肉的图像将自动保存，以辅助执业临床诊治医师进行临床诊断。

- **实时诊断：**实时显示内窥镜影像、圈出病灶的功能。
- **AI 结果查询：**显示病灶位置勾选、总体 AI 结果、影像按疾病归类、影像及其 AI 结果展示、单张影像 AI 结果反馈的功能。

大语言模型 AI 报告

数智医疗影像云平台为用户提供大语言模型 AI 报告能力，用户在编辑诊断报告时，可通过大语言 AI 模型进行报告内容疾病解读、历史报告比对、报告质控纠错。

- **报告疾病解读：**通过将诊断报告输入大语言 AI 模型，生成针对报告疾病的含义解读，并针对疾病输出健康建议；
- **历史报告比对：**通过将同一患者同类型的历史诊断报告调用大语言模型，进行历史报告总结和病情变化比对总结，以便医生快速提炼病情变化；
- **报告质控纠错：**通过将诊断报告输入至模型将报告中的错别字进行检出，并智能纠错以便提高报告书写质量。

平台管理

数智医疗影像平台为管理者提供强大的管理平台，用户登录至数智医疗影像平台管理端默认进入当前机构首页，可进行如下操作：

- **医院管理：**管理员可查看机构信息、存储用量情况、资源续费记录、医院 logo 自定义、医院二维码下载等操作。
- **医生管理：**管理员可进行机构内人员的配置。
- **检查管理：**管理员可管理院内检查属性的配置，包括设备类型、设备管理、部位类型、检查项目的配置。
- **报告管理：**管理员可配置各学科的检查报告模板，包括页眉、正文、页脚、标题等格式的配置。
- **云胶片配置：**管理员可配置云胶片生效时机。
- **数据管理：**管理员可进行云端检查的归档与取回管理。
- **通知管理：**管理员可配置消息通知的属性，包括消息类型、通知方式、通知范围、通知时机等。
- **日志审计：**管理员可查看平台所有的日志信息，包括检查日志、用户日志、会诊日志、数据维护等。

移动端

最近更新时间：2026-01-12 10:51:02

简介

数智医疗影像平台拥有丰富的医学影像应用功能、人工智能辅助诊断、强大的影像浏览工具，满足医疗行业院内、院间互联互通、降本增效的全场景需求。阅读本文您将快速了解数智医疗影像平台在移动端的操作与使用。

前提条件

- 推荐安装手机 QQ 浏览器、腾讯会议 App (iOS 或 Android)
- 登录 [数智医疗影像平台移动端](#)

注册和登录

注册

医联体管理员账号请联系腾讯觅影工作人员后台为您开通。普通用户账号请联系您所属机构的管理员为您添加开通。

登录

在移动端访问数智医疗影像平台，进入账号密码登录页面。您可输入账号密码登录，当您第一次登录时，需要设置初始登录密码才可以登录成功。



远程诊断

登录成功后，您即进入数智医疗影像云平台移动端主界面，在该页面您可以选择功能模块，包括本院诊断、远程诊断、远程会诊、远程查房。



影像浏览

在检查列表双击任意检查，即可进入该检查的影像浏览页面浏览患者影像。



说明:

- 当您的设备在连接移动网络时，查看 DICOM 影像时将默认加载缩略图，避免花费较多的网络流量。您也可以单击查看原图加载原始影像大小。
- 当您的设备在连接 WIFI 网络时，系统将默认加载原始 DICOM 影像。

报告编辑

在检查列表操作栏单击任意检查的报告，即可进入该检查的报告编辑页面。

- 报告编辑：**用户可进行报告编辑、保存。
- 报告审核：**有权限的用户可进行报告初诊、审核。

说明:

一个检查报告同时仅允许一个用户编辑，当您正在编辑时将锁定该报告的编辑状态至您名下。保存或审核后将释放编辑状态，或连续30min无操作时系统将自动释放编辑状态。

检查管理

用户在检查列表可进行检查管理：

- **检查筛选：** 用户可通过各种条件筛选检查，包括检查状态、设备类型、检查类别、扫描方式等。
- **关键字搜索：** 用户可通过患者姓名、患者 ID 等关键字进行检查搜索。

远程会诊

用户在数智医疗影像云移动端首页单击远程会诊可进入远程会诊列表，在该页面您可以进行院内或跨院间的多学科会诊。

创建会诊

用户在会诊列表单击创建会诊即可进入创建会诊的页面：

- **邀请对象：** 用户可从通讯录选择会诊科室或会诊对象，并可选择必须参加的对象。所有必须参加的科室必须审核同意后，会诊才会拉取成功。
- **会诊资料：** 用户可通过患者证件号、HIS 号关联云端的患者信息、检查信息至当前会诊。也支持从本地上传文件。

The screenshot shows the 'Create Consultation' page. At the top, there is a text input field labeled 'Please paste information' with placeholder text 'Please paste meeting sharing information, click recognition after identification to automatically fill in the corresponding information on the left'. Below this are two buttons: 'Operation Guide >' and 'Clear' (清空). A blue button labeled 'Recognition' (识别) is highlighted. The main form area has the following fields:

- Consultation Information:** 'Meeting ID' (会议号) is required and empty. Placeholder: 'Please enter the meeting ID or recognize and fill in'. 'Meeting Link' (会议链接) is required and empty. Placeholder: 'Please enter the meeting link or recognize and fill in'. 'Consultation Topic' (会诊主题) is required and empty. Placeholder: 'Please enter the consultation topic or recognize and fill in'.
- Consultation Start Time:** 'Consultation Start Time' (会诊开始时间) is required and set to 'Today Tuesday 11:00'.
- Consultation End Time:** 'Consultation End Time' (会诊结束时间) is required and set to 'Today Tuesday 12:00'.
- Invited Objects:** 'Invited Objects' (邀请对象) is required and empty. Sub-options include 'Add 0 experts' (已添加0位专家), 'Select Department' (仅选科室), and 'Select Expert' (选择专家).
- Consultation Type:** 'Consultation Type' (会诊类型) is required and set to 'Single specialty consultation' (单学科会诊).
- Reason/Requirement:** 'Reason/Requirement' (理由/要求) is required and empty. Placeholder: 'Please enter the reason and requirements for the consultation, no more than 1000 characters'.

会诊审核

用户在会诊审核列表可进行会诊审核，前提是用户具备审核权限：

- **调剂专家：**审核用户在会诊审核页面单击调剂专家，可修改调剂科室的参会专家。
- **审核会诊：**审核用户可单击同意并参会、同意、拒绝进行会诊审核。

加入会诊

会诊审核完成后，所有被邀请的参会人员在会诊列表可加入会诊：

- **会诊室：**所有参会人员单击查看会诊可进入会诊室，查看会诊信息、患者信息、云端资料、上传资料、会诊流程等信息。用户单击查看影像可浏览 DICOM 影像，单击影像报告可查看当前云端影像对应的报告内容。
- **音视频会诊：**所有参会人可单击开启音视频会诊进入腾讯会议开始会诊，系统将自动引导跳转至腾讯会议。
- **会诊报告：**所有参会人均可在会诊室内编辑会诊报告。单击编辑后激活报告编辑进行内容撰写，完成后可进行保存、提交、打印。

患者影像档案

数智医疗影像平台为用户提供患者影像档案（微信小程序）管理个人医学影像和检查，实现一部手机随时查看、长期存储安全可靠。

登录


用户在微信小程序搜索患者影像档案可进入登录页，通过微信授权手机号完成注册并进入首页，也可扫描小程序二维码进行登录。



成员管理

用户登录完成后，需进行个人信息完善并进行实名验证，以便自动匹配云端的检查。

- **个人信息完善：**用户在我的 > 成员管理中完善个人信息，其中姓名、证件号码为必填项以便进行身份核验。
- **多成员管理：**用户在我的 > 成员管理中单击添加成员，查看报告影像可添加家庭成员，完善成员信息并验证后，可查看成员云端的影像检查。

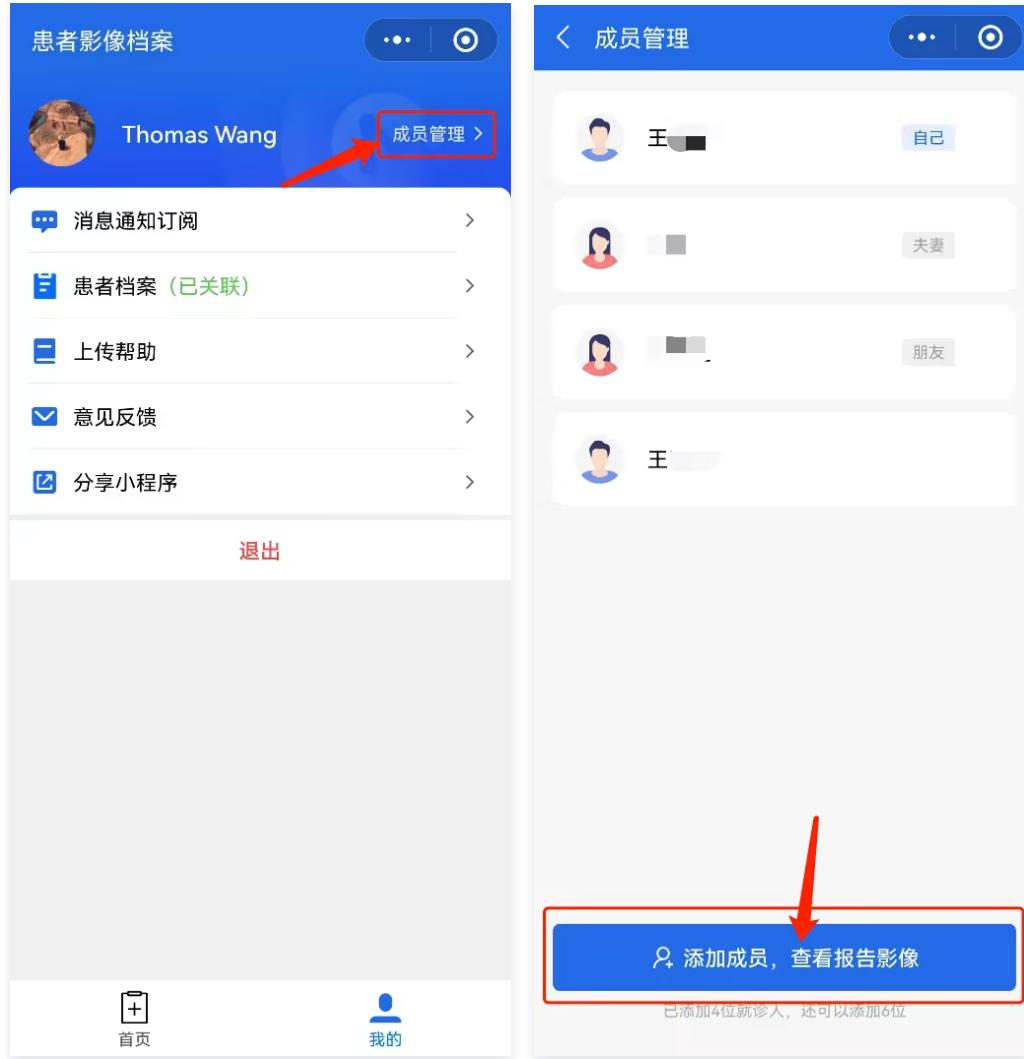



查看检查

用户完善个人信息并验证后，系统会自动匹配云端检查，用户也可手动检索自己的检查。

- 查看检查：**用户完善个人信息后，系统会自动通过证件号或手机号匹配用户云端的检查。用户在检查列表单击检查即可浏览自己的检查报告和影像。
- 分享检查：**用户在查看个人检查时，可单击分享将检查分享给微信好友。分享时，用户可设置分享检查的有效期、密码，保护个人隐私安全。
- 下载检查：**用户在查看个人检查时，可单击下载将检查的原始 DICOM 影像下载至本地。下载时，用户需在链接有效期内通过输入安全码进行下载。
- 手动匹配：**如果用户无法查看个人的检查，可尝试通过检索检查 ID、检查日期、机构名称手动搜索检查并匹配至个人名下。

< 查看报告 ⋮ ⚙

人民医院

内镜检查报告单

姓名: [REDACTED] 性别: 未知
年龄: 47岁 患者ID: [REDACTED]
检查ID: [REDACTED] 检查部位: ...,
检查科室:
检查时间: 2021-08-09 19:28:00
收起 >

检查描述

食管: 粘膜光滑, 色泽正常, 管壁蠕动好, 未见糜烂、溃疡或肿物, 未见静脉曲张。

贲门: 开闭自然, 齿状线清晰, 距门齿约39Cm。

胃底: 粘液湖淡黄, 粘膜光滑, 未见糜烂、溃疡或肿物。

胃体: 粘膜光滑, 未见糜烂、溃疡或肿物。

胃角: 形态正常, 未见糜烂、溃疡及肿物。

胃窦: 粘膜充血水肿, 可见多处小片状糜烂灶, 未见溃疡或肿物, 窦壁蠕动良好。

幽门: 圆形, 开闭自然。

十二指肠球部: 粘膜光滑, 未见糜烂、溃疡或肿物。

十二指肠降段: 粘膜光滑, 未见糜烂、溃疡或肿物

[查看影像](#)



说明:

用户首次完善个人信息后, 必须先进行一次手动检查匹配进行校验。匹配成功后, 系统会自动拉取该用户云端的所有检查。